


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ СПИНЫ

Модель UM-04

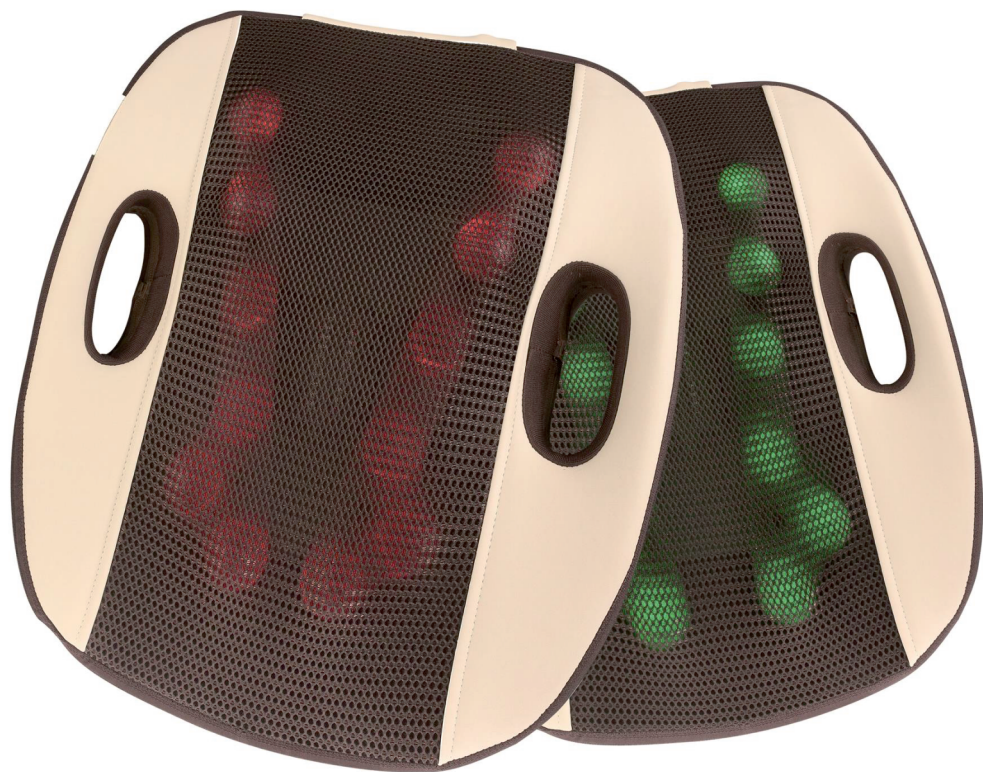

## СОДЕРЖАНИЕ

- Технические характеристики
- Комплектация
- Общие сведения о приборе
- Противопоказания
- Основные правила использования прибора
- Меры безопасности
- Возможные неисправности прибора и способы их устранения
- Уход за прибором
- Гарантийные обязательства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания от сети: 100-240 В, 50-60 Гц

Источник питания от прикуривателя автомобиля: 12 В

Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт

Вес в упаковке: 3,5 кг

Рекомендованная продолжительность непрерывной работы: 15 мин.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Массажная подушка для спины – 1 шт.
2. Адаптер для питания от электросети - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Коробка – 1 шт.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Массажная подушка предназначена для проведения разминающего массажа различных частей тела за счет движения массажных головок.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Острые воспалительные процессы и лихорадочные состояния (высокая температура).
- Кровотечения и предрасположенность к ним.
- Опухоли различной локализации.
- Некоторые заболевания кожи, гнойные процессы.
- Воспаления лимфатических узлов и сосудов.
- Тромбоз или острое воспаление вен, выраженное варикозное расширение вен.
- Психические заболевания с чрезмерным возбуждением.
- Острые респираторные заболевания (ОРЗ).

**ВНИМАНИЕ!** Если применение массажной подушки доставляет вам боль или сильный дискомфорт, то перед повторным массажем проконсультируйтесь со специалистом.



## ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Время непрерывной работы прибора не должно превышать 15 минут.

1. Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы.
2. Подсоедините шнур питания к электрической розетке.
3. Нажмите на кнопку один раз - начинается массаж и прогрев, если нажать еще раз прогрев отключается.
4. При удержании кнопки 3 сек прибор выключится.
5. Вращение меняется автоматически.
6. Прибор отключится автоматически через 15 минут.
7. Если массажер не используется, то отсоедините его от сети.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Данный прибор является сложным техническим устройством, пожалуйста, во избежание травмы или поражения электрическим током, соблюдайте меры безопасности во время использования.

1. Перед началом использования прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Массажер предназначен только для личного пользования. Не используйте прибор в коммерческих целях.
3. Перед началом использования прибора проконсультируйтесь со специалистом.
4. Используйте массажер только по его прямому назначению, как указано в данном руководстве по эксплуатации.
5. Не используйте прибор во время беременности или плохого самочувствия.
6. Не используйте прибор во время сна.
7. Не используйте прибор на пораженных участках кожи.
8. Не допускайте к использованию прибора детей и людей с ограниченными возможностями.
9. Не используйте прибор в чрезмерно влажных и пыльных условиях, поскольку это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
10. Не используйте прибор в помещении с температурой 40°C или выше.
11. Не допускайте нагревания массажера от тепловых приборов или попадания на прибор прямых солнечных лучей.
12. Не используйте прибор в случае повреждения тканевого покрытия.
13. Не вставляйте посторонние предметы в прибор.
14. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов.
15. Не опускайте прибор в воду и не беритесь за него влажными руками.
16. В случае попадания жидкости на прибор отключите массажер от сети и обратитесь к специалисту в сервисный центр.
17. Не накрывайте прибор тканевыми покрытиями или одеждой во время использования, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
18. Не вставайте на прибор ногами, не садитесь на него и не кладите на массажер тяжелые предметы, так как это может привести к травме или поломке.
19. Отключайте прибор от электросети после использования.

- 
20. Не вскрывайте прибор самостоятельно, это может привести к травме или поражению электрическим током.
  21. Если Вы не используете массажер в течение длительного времени, храните его в пыле- и влагонепроницаемом месте.
  22. Для очистки массажера используйте мягкую ткань. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные моющие средства.
  23. Запрещается подвергать массажер-подушку сухой химчистке.
  24. В случае поломки прибора обратитесь к специалисту в сервисный центр. Не пытайтесь производить самостоятельный ремонт прибора.
  25. Несоблюдение мер безопасности снимает прибор с гарантийного обслуживания.
  26. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

# Дарсонваль

Применяется при:

- выпадении волос;
- проблемной коже;
- угревой сыпи;
- сухости и наличии морщин;
- жирной коже головы;
- целлюлите

**4**  
сменные насадки



модель IM-02



# Дарсонваль

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАБОТА  
О КОЖЕ И ВОЛОСАХ


модель IM-01



**НАСАДКА «ГРИБОК»**  
Для общих процедур  
по уходу за кожей  
лица и тела



**НАСАДКА «КАПЛЯ»**  
Точечное воздействие  
на небольшие  
участки кожи

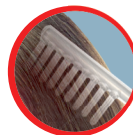

**НАСАДКА «РАСЧЕСКА»**  
Стимуляция роста  
и укрепление  
корней волос

**3**  
сменные насадки

# Ультразвуковой прибор

для ухода за кожей лица

модель UC-01

Три режима работы:

- очищение
- увлажнение
- лифтинг

**3в1**



Работает от аккумулятора





**ЗДОРОВЬЕ**

## Массажер для шеи, плеч и спины

*8 стимулирующих  
роликов*

*ИК-прогрев*

*2 вида адаптеров -  
для дома и автомобиля*


*Простое управление*

*Мощный двигатель*

*Материалы  
повышенной  
прочности*



модель  
UM-10

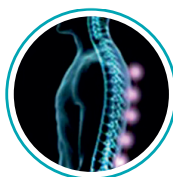

## Массажер для шеи и плеч

*Позволит Вам  
расслабиться,  
восстановить силы,  
насладиться  
массажем.*

*Используется  
для различных  
частей тела: шеи,  
плеч, бедер, спины,  
поясницы и т.д.*

модель UM-01



НОВИНКА



# Массажер для ног ПОГРУЖНОЙ

*Воздушно-компрессионный и  
роликовый массаж*

*Интуитивно понятная  
панель управления*

*Является прекрасной  
альтернативой  
профессиональному  
массажу*

*Стильный современный  
дизайн*



модель  
UM-07

# МАССАЖЕР для тела

модель UM-11

*Восстанавливающий массаж  
для всего тела*

*2 сменные насадки в комплекте*

*Удобная эргономичная ручка*







КОМФОРТ

# Ультразвуковой увлажнитель воздуха



модель  
УН-01

*Бесшумный и экономичный, с регулировкой интенсивности пара и возможностью ароматизации воздуха.*

Подробная информация на сайте: [dd-rus.ru](http://dd-rus.ru)  
[domdoctor.ru](http://domdoctor.ru) т. 8-800-100-14-15

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина неисправности	Возможный способ устранения неисправности
Шум во время работы	При правильной работе изделия, звук трения вызван трением между массажной головкой и тканевым чехлом	Это результат нормальной работы прибора. Устранение проблемы не требуется
Массажер не включается	Прибор не подключен к электричеству	Подключите прибор к сети и проверьте надежность контакта вилки в розетке
	Включилась защита от перегрева	Сделайте 30-минутный перерыв

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой массажной подушки отключите ее от электросети.
- Очищайте прибор тканью, смоченной в мягком моющем средстве.
- Не погружайте прибор в воду и прочие жидкости.



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- На настоящий прибор установлен гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия или замену на аналогичный прибор в случае невозможности ремонта.
- Бесплатное гарантийное обслуживание осуществляется только в случае соблюдения покупателем правил эксплуатации согласно инструкции пользования прибором.
- Повреждения прибора не должны быть следствием потребительского износа.
- Обязательства по гарантийному обслуживанию оказывает организация, продавшая изделие.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер прибора \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце \_\_\_\_\_

*Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.*

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Официальный сервисный центр D&D: (3412) 572-005

Адрес: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 73

E-mail: [info@dd-rus.ru](mailto:info@dd-rus.ru)

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



Массажная подушка для спины марки D&D (Ди энд Ди)  
Модель UM-04

**Завод изготовитель:**

Shenzhen New Gain Import & Export Ltd

**Адрес завода изготовителя:**

6/F, Building C, Dong He Industrial Mansion, No.6 Yue He Street, Sha Shen Road,  
Sha Tou Jiao Yan Tian District, Shenzhen, China  
6/F Билдинг С, Донг Хе индастриал Мэнсон, №6 Юэ Хе стрит, Ша Шен роуд,  
Ша Тоу джао Иан Тиан дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

**Импортер:**

ИП Богоявленский Д. В., Республика Татарстан, Агрызский район, д. Иж-Бобья. Тел.: (3412) 572-005