

GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
m 915
МАССАЖЕР ГУАША



ИОНОФОРЕЗ

МИКРОТОКИ

ВИБРОМАССАЖ

LED ТЕРАПИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

GEZATONE ОБЪЕДИНИЛ АППАРАТНЫЕ ТЕХНИКИ И МАССАЖ ГУАША ДЛЯ ЛИЦА В МИНИАТЮРНОМ УСТРОЙСТВЕ – m915. С ПОМОЩЬЮ МАССАЖЕРА МОЖНО ПРОРАБОТАТЬ ВСЕ «ПРОБЛЕМНЫЕ» ЗОНЫ И КОРРЕКТИРОВАТЬ МОРЩИНЫ, МОДЕЛИРОВАТЬ ОВАЛ, СОКРАТИТЬ ОТЕКИ И ЗАМЕДЛИТЬ УВЯДАНИЕ.

ТАКЖЕ, ПРИБОР ПОЗВОЛЯЕТ НОРМАЛИЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ЖИРНОЙ КОЖИ, РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕННОГО САЛООТДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩАЯ ПОРЫ, УСТРАНЯЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТАКНЕ И СНИЖАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ.



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ, ЭЛАСТИЧНОСТИ И ПЛОТНОСТИ КОЖИ, МОРЩИНЫ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ



ОТЕЧНОСТЬ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА



СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ, ПОСТАКНЕ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА, САЛЬНЫЙ БЛЕСК



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

ФУНКЦИИ




3 РЕЖИМА

СОЧЕТАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ МИКРОТОКОВ, ИОНОФОРЕЗ, ТРИ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ И СВЕТОТЕРАПИЮ, АППАРАТ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ КОЖИ В БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ.

ПОМИМО СОКРАЩЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО УВЯДАНИЯ, МАССАЖЕР ПОЗВОЛЯЕТ НОРМАЛИЗОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ЖИРНОЙ КОЖИ, РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕННОГО САЛООТДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩАЯ ПОРЫ.

Артикул 1301293

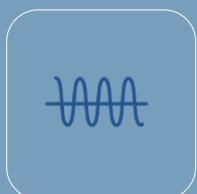

ВИБРАЦИЯ /
ВИБРОМАССАЖ



ИОНОФОРЕЗ



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ
МИКРОТОКИ



LED
ТЕРАПИЯ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



Артикул 1301293

ПРИБОР ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ, МИКРОТОКОВ, ИОНОФЕРЕЗА И СВЕТОТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ.



ИОНОФЕРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО В КОЖЕ.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ВИБРОМАССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.




LED ТЕРАПИЯ

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА И РАЗДРАЖЕНИЯ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

ВИБРОМАССАЖ


ТРИ ВИДА ВИБРАЦИИ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО, ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И КОЖУ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИБРОМАССАЖА УХОДИТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ.

ВИБРАЦИЯ СТИМУЛИРУЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ ОТЕКИ, ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КЛЕТКИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КИСЛОРОДА.

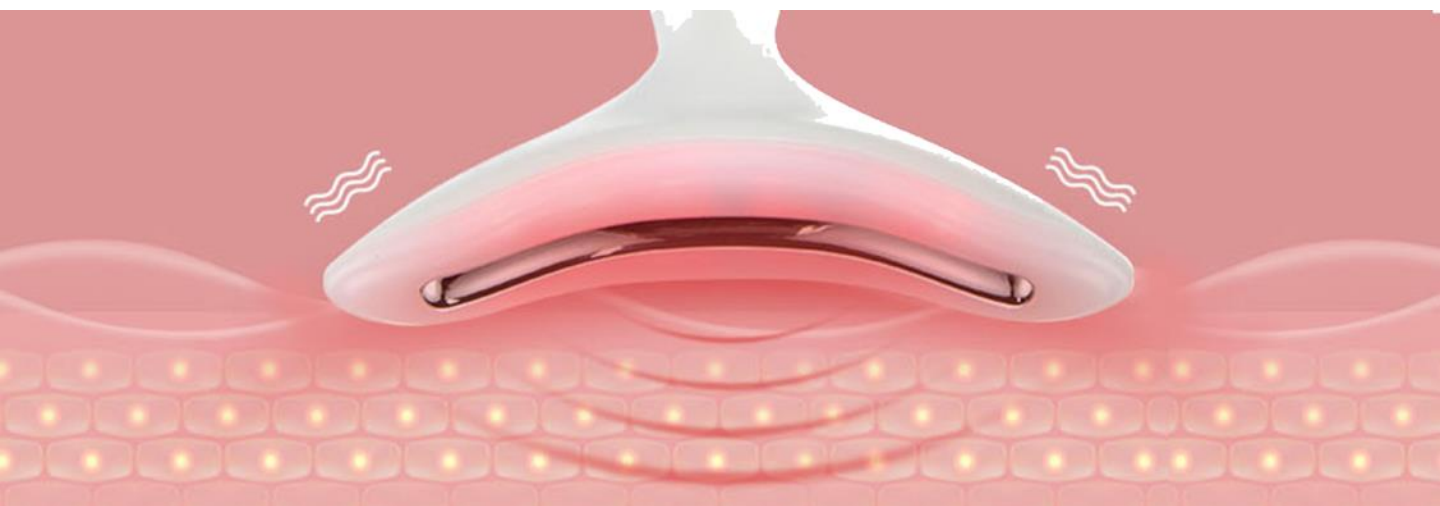

3


УРОВНЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ

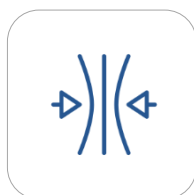

ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
МЕЛКИХ МОРЩИН

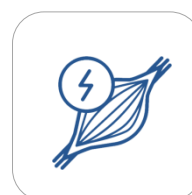


УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-БРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА

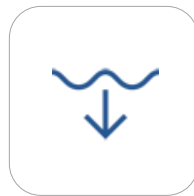


УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ



ДЕТОКСИКАЦИЯ

ИОНОФОРЕЗ


ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ УСИЛИВАЮТ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КОЖУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ (ИОНИЗИРОВАННЫХ) ПРЕПАРАТОВ, ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ ИОНОФОРЕЗА. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК ПЕРЕВОДИТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОВЫШАЕТ ГЛУБИНУ ИХ ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ДО НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЖЕ «ДЕПО» АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

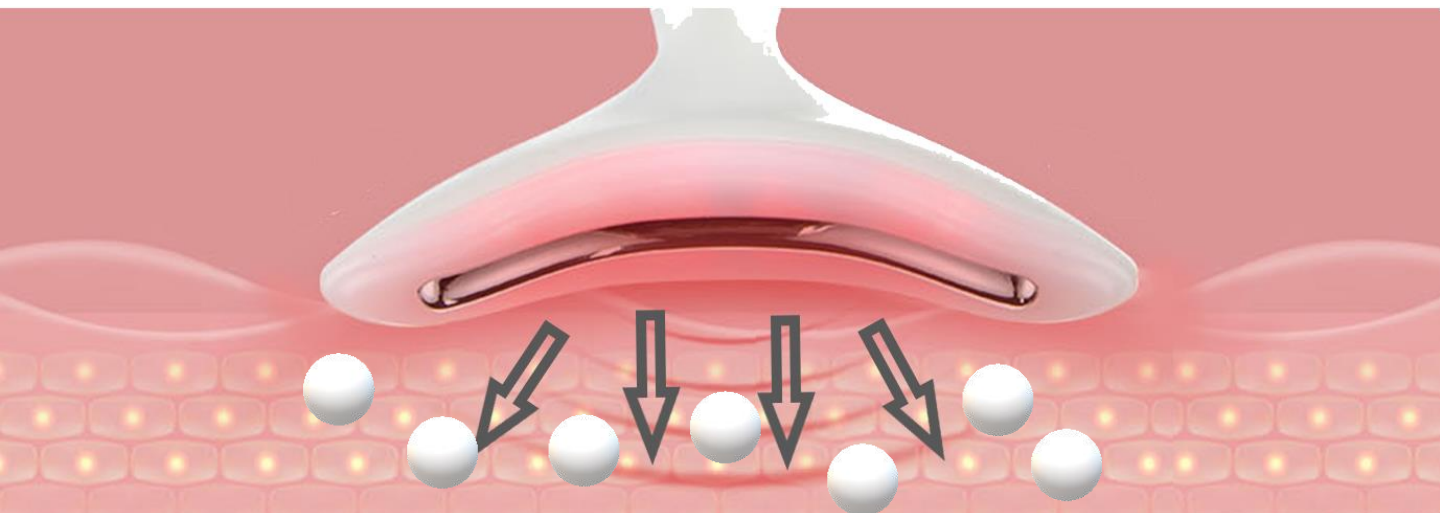

УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ КОЖИ




УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ

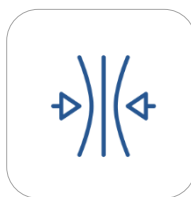

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН

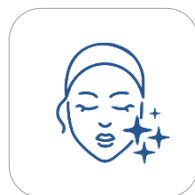


УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС



УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР

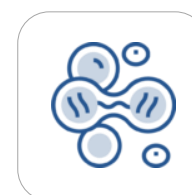

УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ

LED ТЕРАПИЯ

СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ПРОНИКАЮТ В КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ И ОКАЗЫВАЮТ МНОЖЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ. БЛАГОДАРЯ ЭНЕРГИИ СВЕТА ПОВЫШАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ, УСИЛИВАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ ВЕЩЕСТВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ.



КРАСНЫЙ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ СВЕТ С ВЫСОКОЙ ГЛУБИНОЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ.

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- УМЕНЬШЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР

СВЕТОВАЯ ВОЛНА КРАСНОГО СПЕКТРА КОРРЕКТИРУЕТ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МОРЩИНЫ.

ЗЕЛЕНый

ОКАЗЫВАЕТ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, УСПОКАИВАЕТ КОЖУ И СТИМУЛИРУЕТ МЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ, СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН.

- АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
 - УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА

ВОЗВРАЩАЕТ КОМФОРТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕ, СНИЖАЕТ ЭРИТЕМУ, НОРМАЛИЗУЕТ СОСУДИСТЫЙ ТОНУС, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ И ПАСТОЗНОСТЬ, УСИЛИВАЕТ ДРЕНАЖ.



СИНИЙ

ОДИН ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ЦВЕТОВ, ИЗВЕСТНЫЙ СВОИМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ, АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ И УСПОКАИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ.

- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАЗДРАЖЕННУЮ, ВОСПАЛЕННУЮ КОЖУ
- УСКОРЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА

КУРСОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕГО ЦВЕТА СНИЖАЕТ ЧАСТОТУ РЕЦИДИВА АКНЕ ДО 75%.



МАССАЖ ГУАША

КОНФИГУРАЦИЯ m915 ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ ПРИБОР, ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ КИТАЙСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА ГУАША, ИЗВЕСТНОГО С ДАВНИХ ВРЕМЕН.



МАССАЖ ГУАША **СТИМУЛИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ**, ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ И СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, **УСТРАНЯЕТ ЗАСТОЙ** ЛИМФЫ И ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАКОПЛЕННЫХ ТОКСИНОВ И **ОТЕЧНОСТИ**.

ТАКЖЕ, МАССАЖНАЯ ТЕХНИКА **УСТРАНЯЕТ СПАЗМ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ**, ЧТО ПРИВОДИТ К УМЕНЬШЕНИЮ МОРЩИН, КОЖНЫХ ЗАЛОМОВ И СКЛАДОК. ПОМИМО ЭТОГО, ГУАША **ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ КОЖЕ ЛУЧШЕ УСВАИВАТЬ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.


Артикул 1301293



ЛИМФОДРЕНАЖ



ДЕТОКСИКАЦИЯ

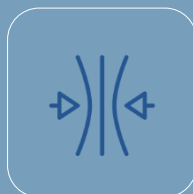

ЛИФТИНГ



ТОНИЗАЦИЯ И
СОКРАЩЕНИЕ ПОР

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

ТРИ КОМБИНИРОВАННЫХ РЕЖИМА, ТРИ ЦВЕТА ФОТОТЕРАПИИ И ТРИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ ПОЗВОЛЯТ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ РАЗНЫХ ТИПОВ.



Артикул 1301293

1



КОМБИНАЦИЯ КРАСНОГО СВЕТА, ИОНОФЕРЕЗА И ВЫСОКО-ЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ **10000** КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ, КОРРЕКЦИИ ПРИЗНАКОВ ВОЗРАСТА И МОРЩИНОК. БОРЕТСЯ С ТУСКЛЫМ ЦВЕТОМ И НЕРАВНОМЕРНЫМ ТОНОМ.

2



СОЧЕТАНИЕ ЗЕЛЕННОГО СВЕТА, ВИБРАЦИИ **9500** КОЛЕБАНИЙ И ИОНОФЕРЕЗА УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕТ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ МОРЩИН.

3



СИНИЙ СВЕТ В СОЮЗЕ С ИОНОФЕРЕЗОМ И ВИБРАЦИЕЙ **8000** КОЛЕБАНИЙ УСТРАНЯЕТ ВОСПАЛЕНИЯ И РАЗДРАЖЕНИЕ, ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ОН СИМПАТИЧНЫЙ И НЕОБЫЧНЫЙ.** КОНФИГУРАЦИЯ МАССАЖЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ АППАРАТНЫЕ КУРСЫ КОРРЕКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕХНИКУ ГУАША.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВСЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ.
- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА И В ПОЕЗДКАХ.
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В СУМКЕ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 15 МИНУТ.
- ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ ЗАПОМИНАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- **ПРОСТОТА** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.



Артикул 1301293

3

3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



УПРАВЛЕНИЕ
ОДНОЙ
КНОПКОЙ

3

3 УРОВНЯ
ВИБРОМАССАЖА



РАБОТАЕТ
ОТ
АККУМУЛЯТОРА

3

3 ЦВЕТА
LED ТЕРАПИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ, ТРИ ЦВЕТА СВЕТОТЕРАПИИ И ТРИ ЧАСТОТЫ ВИБРОМАССАЖА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИКИ.



ГЛАДКИЙ ЭЛЕКТРОД ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ

ПЛОТНО СОПРИКАСАЕТСЯ С КОЖЕЙ, ЛЕГКО СКОЛЬЗИТ, ПОВТОРЯЯ КОНТУРЫ И ИЗГИБЫ. КОНФИГУРАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ СЕАНСЫ МАССАЖА ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ.

НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАРЯДКИ

НАЛИЧИЕ АККУМУЛЯТОРА ИСКЛЮЧАЕТ НЕУДОБСТВА ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВАМ НЕ НУЖНА ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА, ВЫ НЕ ЗАДЕВАЕТЕ ПРОВОДОМ ПО ЛИЦУ. АППАРАТ САМ НАПОМНИТ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЗАРЯДКА, МИГАЯ КРАСНЫМ СВЕТОМ.



ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ПРИБОР ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ, ОН **ВЕСИТ ВСЕГО 75 ГРАММ**, РУКА НЕ УСТАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА. ЛЕГКО ПОМЕЩАЕТСЯ В СУМОЧКЕ, ЕГО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ОТДЫХ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ, ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАТЬ КУРС ПРОЦЕДУР.



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ, СМЕНА ПРОГРАММ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ 1 КНОПКИ. ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



Артикул 1301293



USB ШНУР
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

75
ГРАММ



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ
АППАРАТНОЕ
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И
ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ.
ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПО
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ
ЛИЦА И ШЕИ.



5

ДАЛИТЕ ОСТАТКИ
АППАРАТНОГО СРЕДСТВА,
ПРОТРИТЕ ЛИЦО
ТОНИКОМ, НАНЕСИТЕ
МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ 2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ, ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ ОТ 15 ДО 20 ПРОЦЕДУР.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ПРИБОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ.

ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТНОЙ КОСМЕТИКИ, РАБОТА ПО СУХОЙ КОЖЕ ЗАПРЕЩЕНА.

КОЛЛАГЕНОВАЯ
СЫВОРОТКА



4515119K – 6 x 5 мл

АКВА – ГЕЛЬ
АЛОЭ ВЕРА



4501417AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

ГЕЛЬ
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ



4504006K – 120 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл


РЕЗУЛЬТАТЫ*



ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ M915, СОХРАНЯЕТ И ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ. ПОДЪЯГИВАЕТСЯ КОЖА, ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС И ПЛОТНОСТЬ, СОКРАЩАЕТСЯ ГЛУБИНА МОРЩИНОК. ЛИЦО СТАНОВИТСЯ СВЕЖИМ, КОЖА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ТОКСИНОВ, УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ СОКРАЩАЕТСЯ САЛЬНЫЙ БЛЕСК, СУЖАЮТСЯ ПОРЫ, СНИЖАЕТСЯ ЧАСТОТА ПОЯВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕНСТВ.



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ

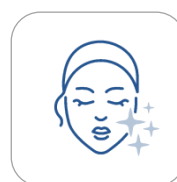

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ
ПОР



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН И
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОВАЛА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕКОВ И
ДЕТОКСИКАЦИЯ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА
3 ЧАСА



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул 1301293

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	DC 5В, 1А
ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИЙ	8000-11000 колебаний/минуту
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	2 ЧАСА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ	-2. -4 В.
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	3
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ LED ТЕРАПИИ	3
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	100x52x90 мм
РАЗМЕР В УПАКОВКЕ	185x138x60 мм
ВЕС ПРИБОРА БЕЗ УПАКОВКИ	75 грамм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, m915 -1 шт.
 USB-кабель – 1
 Руководство по эксплуатации – 1
 Упаковочная коробка – 1



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>