

LD Prof-Plus
LD Prof-I
LD Prof-II
LD Prof-III
LD Prof-IV

Little Doctor®

Стетоскоп LD

Руководство по эксплуатации

LD стетоскопи

Қўллаш бўйича йўриқнома

Стетоскоп LD

Пайдалану жөніндегі басшылық құжат

RUS

UZB

KAZ




! ВАЖНО!

Перед использованием стетоскопа внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации.

Данные приборы являются медицинскими изделиями в соответствии с законодательством Российской Федерации ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” ст 38.

Прибор рекомендуется для использования в условиях клиник и стационаров, а также в домашних условиях как дополнение к медицинскому наблюдению.

LD PROF-PLUS

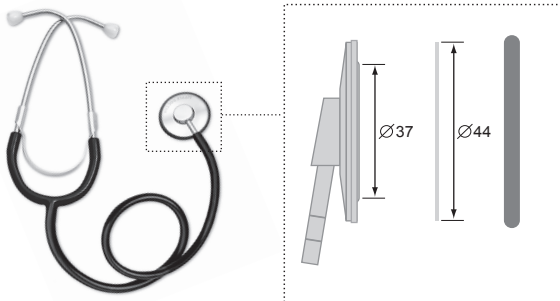


Описание: стетоскоп LD Prof-Plus – это фонендоскоп для прослушивания тонов Короткова, состоящий из головки в виде диафрагмы с пластиковой мембраной, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.

Комплектация:

- Головка к стетоскопу (LD-S025) из легкого металла с мембраной (LD-S023) диаметром 44 мм – 1 шт.
- Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (возможные цвета поставляемых трубок: черный, серый, красный, синий, фиолетовый, зеленый, желтый) – 1 шт.
- Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.
- Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 x 110 x 40

Масса без упаковки, г: 76

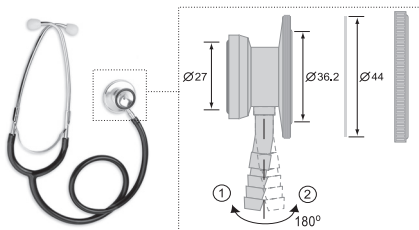


Описание: стетоскоп LD Prof-I – это стетофонендоскоп для врачей и среднего медицинского персонала, состоящий из двусторонней головки в виде диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого колокола, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.

Комплектация:

- Головка к стетоскопу (LD-S017) – двусторонняя из легкого металла с большой диафрагмой и открытым колоколом – 1 шт. Диаметр мембраны (LD-S023) – 44 мм. Колокол головки имеет контактное резиновое кольцо. Диаметр колокола 27 мм. Простой и удобный механизм переключения между колоколом и диафрагмой путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки. Позиция 1 устанавливает в рабочее состояние диафрагму, позиция 2 устанавливает в рабочее состояние колокол.
- Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (возможные цвета поставляемых трубок: черный, серый, красный, синий, фиолетовый, зеленый, желтый) – 1 шт.
- Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.
- Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 x 110 x 40

Масса без упаковки, г: 135

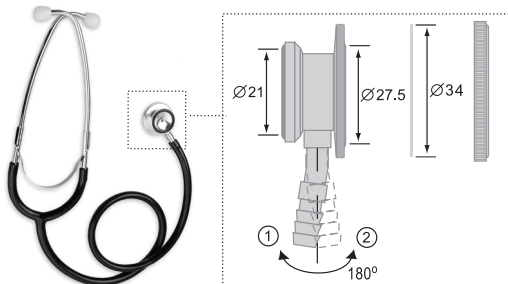


Описание: стетоскоп LD Prof-II – это специализированный педиатрический стетофонендоскоп, состоящий из двусторонней головки в виде диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого колокола, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.

Комплектация:

- Головка к стетоскопу (LD-S028) – двусторонняя из легкого металла с уменьшенной диафрагмой и открытым колоколом – 1 шт. Диаметр мембраны (LD-S024) – 34 мм. Колокол головки имеет контактное резиновое кольцо. Диаметр колокола 21 мм. Простой и удобный механизм переключения между колоколом и диафрагмой путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки. Позиция 1 устанавливает в рабочее состояние диафрагму, позиция 2 устанавливает в рабочее состояние колокол.
- Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (возможные цвета поставляемых трубок: черный, красный, синий, фиолетовый, зеленый) – 1 шт.
- Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.
- Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 x 110 x 40

Масса без упаковки, г: 95

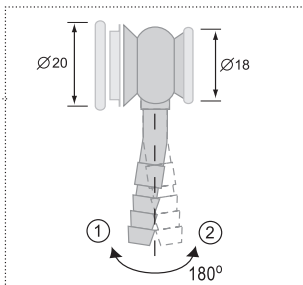


Описание: стетоскоп LD Prof-III – это специализированный неонатальный стетофонендоскоп, состоящий из двусторонней головки в виде диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого колокола, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.

Комплектация :

- Головка к стетоскопу (LD-S037) – двусторонняя из легкого металла с малыми диафрагмой и колоколом – 1 шт. Диаметр мембраны (LD-S040) – 20 мм, диаметр колокола 18 мм. Простой и удобный механизм переключения между диафрагмой и колоколом путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки. Позиция 1 устанавливает в рабочее состояние диафрагму, позиция 2 устанавливает в рабочее состояние колокол.
- Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (возможные цвета поставляемых трубок: черный, красный, синий, фиолетовый, зеленый) – 1 шт.
- Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.
- Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 x 110 x 40

Масса без упаковки, г: 85

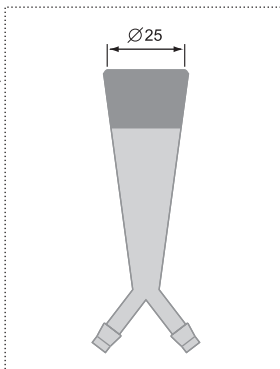

Описание: стетоскоп LD Prof-IV – специализированный акушерский стетоскоп, состоящий из головки в виде колокола, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.

Комплектация:

- Головка к стетоскопу (LD-S038) – легкая металлическая конусообразной формы с пластиковым колоколом – 1 шт. Диаметр колокола – 25 мм.
- Трубки медицинские соединительные (LD-S039) – две звукопроводящие трубки из латекса длиной 56 см (возможные цвета поставляемых трубок: черный, синий, фиолетовый, зеленый) – 1 компл.
- Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.
- Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 x 110 x 40

Масса без упаковки, г: 115.

УХОД, ХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

! ВАЖНО!

1. Стетоскоп необходимо оберегать от повышенной влажности, прямых солнечных лучей, ударов.
2. Не храните и не используйте стетоскоп в непосредственной близости от обогревательных приборов и открытого огня.

3. Оберегайте стетоскоп от загрязнения.
4. Не допускается соприкосновение стетоскопа с агрессивными растворами.
5. При необходимости осуществляйте ремонт только в специализированных организациях. Адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание указаны в гарантийном талоне.
6. Срок службы 7 лет с момента передачи стетоскопа потребителю. Год и месяц производства указаны на упаковке.
7. По истечении установленного срока службы необходимо периодически обращаться к специалистам (специализированные ремонтные организации) для проверки технического состояния стетоскопа.
8. При утилизации руководствуйтесь действующими в данное время правилами в Вашем регионе. Специальных условий утилизации производителем не установлено.
9. Условия эксплуатации: температура от +10°C до +40°C; относительная влажность 85% или ниже. Условия хранения и транспортировки: температура от -34°C до +50°C; относительная влажность 85% или ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. На настоящий стетоскоп установлен гарантийный срок в течение 24 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства оформляются гарантийным талоном при продаже прибора покупателю. Гарантийный талон расположен на последней странице настоящего Руководства.
3. Гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие: применения не по назначению; неосторожного использования, приведшего к повреждению; модификации; ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Требуйте заполнения гарантийного талона торгующей организацией при покупке стетоскопа.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РОССИЯ: Круглосуточная бесплатная линия: 8-800-200-00-37.
г. Москва: (+7- 495) 718-00-44. Интернет: www.LittleDoctor.ru.

БЕЛАРУСЬ: Тел. бесплатной горячей линии: +375 (17) 392-00-11.

КАЗАХСТАН: Тел. бесплатной горячей линии: +7 (7232) 700-790.

УЗБЕКИСТАН : Ташкент: (+998-95) 194-87-12.

СЕРТИФИКАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Производство сертифицировано по международному стандарту ISO13485. Стетоскопы LD соответствуют требованиям ГОСТ 50444-92 Госстандарта России. Росздравнадзор РФ регистрационное удостоверение ФСЗ №2008/01941 выдано 17.09.2020.

Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью республики Таджикистан РУ №005600 от 08.10.2014. Министерство здравоохранения республики Беларусь РУ ИМ-7.100347/1806 от 28.06.2018.

Претензии потребителей по качеству и пожелания направлять по адресу официального импортера:

Россия: 117218 г. Москва а/я 36, ООО «Фирма К и К»
(юр. адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.34, корп.1, пом.VII)

Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37

Украина: а/с 123 м. Київ 03049, «Ергоком» ТПК ПП.

Тел. безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-12-08

Беларусь: 220033 г. Минск, ул. Фабричная 26, часть изол. пом. 4Н, «Фиатос» УП.

Тел. бесплатной горячей линии: +375 (17) 392-00-11

Казахстан: 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 24, ТОО «Казмедимпорт»

Тел./факс: 8 (7232) 76-97-97, e-mail: info@kazmedimport.kz, www.kazmedimport.kz.

Узбекистан: 100157 г. Ташкент, Учтепинский район, квартал 24, улица Ширин, дом 42А «AKBARS PHARM» ООО. Тел. справочной службы: (+99895) 194-87-12

Polska: Little Doctor Europe Sp. z o.o. ul. Zawila 57G, 30-390, Krakow
Tel. +48 12 268-47-46

Производитель: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore (Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд., 7500А, Бич Род, 11-313 Зе Плаза 199591, Сингапур). Почтовый адрес: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699 (Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд., Йишун Централ П.О. Бокс 9293, Сингапур 917699).

Экспортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.)

Место производства / изготовитель: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Литл Доктор

Электроник (Нантонг) Ко., Лтд., Ном. 8, Тонгксинг Рoad Экономик энд Техникал Девелопмент Эриа, 226010 Нантонг, Джиангсу, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Фирма Консалтинг и Коммерция» (ООО «Фирма К и К», юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.34, корп.1, пом.VII).


Уполномоченный представитель производителя, официальный импортер на территории РБ: УП «ФИАТОС», г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н.

Сервисный центр в РБ: г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н, т/ф (+375 17) 392-00-11

Актуальная информация для потребителя: <http://littledoctor.ru/info/>

RUS


РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ:

 Соответствие Директиве Евросоюза

 Представитель в Евросоюзе

 Изготовитель

 Важно: Прочитайте Руководство по эксплуатации

 Дата производства: YYYY – год, MM – месяц (указано на упаковке)

 Номер партии

 Беречь от влаги

Дата редакции настоящего Руководства по эксплуатации указана на последней странице в виде IXXX/YYMM/NN, где YY – год, MM – месяц, а NN – номер редакции.


www.LittleDoctor.ru

Информация о медицинской технике марки LD в Интернете (технические характеристики, функциональные особенности, условия эксплуатации, хранения и гарантийного обслуживания).

! МУҲИМ!

Стетоскопни ишлатишдан олдин ушбу қўлланмани диққат билан ўрганиб чиқинг.

LD PROF-PLUS

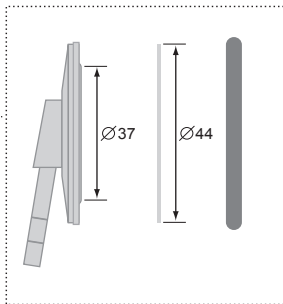


Тавсиф: LD Prof-Plus стетоскопи-бу пластик мембранали диафрагма боши, бириктирувчи найча, бинаурал найчалар ва қулоқ учларидан ташкил топган оҳанглари тинглаш фонендоскопи.

Усуналари:

- Диаметри 44 мм бўлган мембрана (LD-S025) билан енгил металлдан ясалган стетоскоп (LD-S023) боши – 1 дона.
- 56 см узунликдаги тиббий бириктирувчи найча (LD-S020) (етказиб бериладиган найчаларнинг мумкин бўлган ранглари: қора, кулранг, қизил, кўк, бинафша, яшил, сариқ) – 1 дона.
- Бинаурал найчалар (LD-S019) – 1 дона.
- Қулоқ учлари (LD-S066) – 1 компл.

Ўрамдаги умумий ўлчамлар, мм: 230 x 120 x 22

Ўрамсиз масса, г: 76

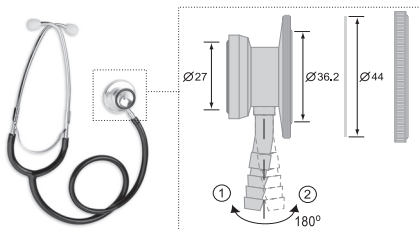

Тавсиф: LD Prof-I стетоскопи-бу шифокорлар ва ўрта тиббиёт ходимлари учун стетофонендоскоп бўлиб, у пластик мембранали икки томонлама диафрагма боши ва очик қўнғироқ, бириктирувчи найча, бинаурал найчалар ва қулоқ учларидан иборат.


Ускуналари:

- Стетоскоп боши (LD-S017) – катта диафрагма ва очик қўнғироқ билан икки томонлама энгил металл-1 дона. мембрана диаметри (LD-S023) - 44 мм. бош қўнғироғида алоқа каучук ҳалқаси мавжуд. Қўнғироқ диаметри 27 мм. бошни новда валфи атрофида 180 даража айлантриб, қўнғироқ ва диафрагма ўртасида осон ва қулай ўтиш механизми. Стержен клапанининг эгилиши бошнинг ишчи томонига ишора қилади. 1-позиция диафрагмани иш ҳолатига, 2-позиция қўнғироқни иш ҳолатига ўрнатади.
- 56 см узунликдаги тиббий бириктирувчи найча (LD-S020) (етказиб бериладиган найчаларнинг мумкин бўлган ранглари: қора, кулранг, қизил, кўк, бинафша, яшил, сариқ) – 1 дона.
- Бинаурал найчалар (LD-S019) – 1 дона.
- Қулоқ учлари – (LD-S066) - 1 компл.

Ўрамдаги умумий ўлчамлар, мм: 230 x 120 x 22

Ўрамсиз масса, г: 135

LD PROF-II

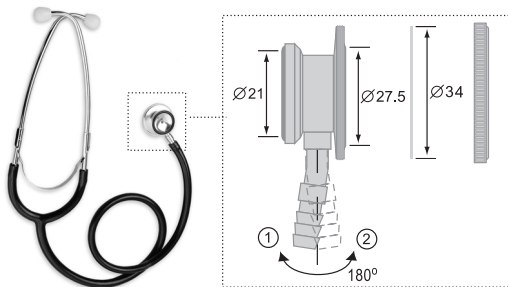


Тавсиф: LD Prof-II стетоскопи-бу пластик мембранали икки томонлама диафрагма боши ва очик қўнғироқ, бириктирувчи найча, бинаурал найчалар ва қулоқ учларидан ташкил топган ихтисослашган Педиатрик стетофонендоскоп.

Ускуналари:

- Стетоскоп учун бош (LD-S028) – диафрагма қисқартирилган ва очик қўнғироқ билан икки томонлама энгил металл-1 дона. мембрана диаметри (LD-S024) - 34 мм. бош қўнғироғида алоқа каучук ҳалқаси мавжуд. Қўнғироқ диаметри 21 мм. бошни новда валфи атрофида 180 даража айлантириб, қўнғироқ ва диафрагма ўртасида осон ва қулай ўтиш механизми. Стержен клапанининг эгилиши бошнинг ишчи томонига ишора қилади. 1-позиция диафрагмани иш ҳолатига, 2-позиция қўнғироқни иш ҳолатига ўрнатади.
- 56 см узунликдаги тиббий бириктирувчи найча (LD-S020) (етказиб бериладиган найчаларнинг мумкин бўлган ранглари: қора, қизил, кўк, бинафша, яшил) – 1 дона.
- Бинаурал найчалар (LD-S019) – 1 дона.
- Қулоқ учлари – LD-S066) - 1 компл.

Ўрамдаги умумий ўлчамлар, мм: 240 x 110 x 40

Ўрамсиз масса, г: 95

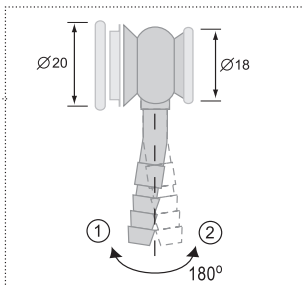


Тавсиф: LD Prof-III стетоскопи-бу пластик мембранали икки томонлама диафрагма боши ва очиқ кўнғироқ, бириктирувчи найча, бинаурал найчалар ва қулоқ учларидан ташкил топган махсус неонатал стетофонендоскоп.

Ускуналари:

- Стетоскоп учун бош (LD-S037) – кичик диафрагма ва кўнғироқ билан икки томонлама энгил металл – 1 дона. мембрана диаметри (LD-S040) – 20 мм, кўнғироқ диаметри 18 мм. диафрагма ва кўнғироқ ўртасида бошни новда клапан атрофида 180 даража буриш орқали осон ва қулай ўтиш механизми. Стержен клапаннинг эгилиши бошнинг ишчи томонига ишора қилади. 1-позиция диафрагмани иш ҳолатига, 2-позиция кўнғироқни иш ҳолатига ўрнатади.
- 56 см узунликдаги тиббий бириктирувчи найча (LD-S020) (етказиб бериладиган найчаларнинг мумкин бўлган ранглари: қора, қизил, кўк, бинафша, яшил) – 1 дона.
- Бинаурал найчалар (LD-S019) – 1 дона.
- Қулоқ учлари (LD-S066) – 1 компл.

Ўрамдаги умумий ўлчамлар, мм: 240 x 110 x 40

Ўрамсиз масса, г: 85

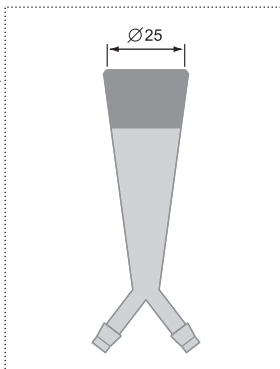

Таъриф: стетоскоп LD Prof-IV -қўнғироқ боши, бириктирувчи найча, бинаурал найчалар ва қулоқ учларидан ташкил топган ихтисослашган акушерлик стетоскопи.

Ускуналари:

- Стетоскоп боши (LD-S038) – пластик қўнғироқ билан енгил металл конус шаклида – 1 дона. қўнғироқ диаметри-25 мм.
- Тиббий бириктирувчи найчалар (LD-S039) – узунлиги 56 см бўлган иккита латекс ўтказувчи найчалар (етказиб бериладиган найчаларнинг мумкин бўлган ранглари: қора, кўк, бинафша, яшил) – 1 компл.
- Бинаурал найчалар (LD-S019) – 1 дона.
- Қулоқ учлари (LD-S066) – 1 компл.

Ўрамдаги умумий ўлчамлар, мм: 240 x 110 x 40

Ўрамсиз масса, г: 115

! MUHIM!

1. Stetoskop yuqori namlik, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, zarbadan himoyalangan bo'lishi kerak.
2. Stetoskopni isitgichlar yoki ochiq olov yaqinida saqlamang yoki ishlatmang.
3. Stetoskopni ifloslanishdan saqlang.
4. Stetoskopning agressiv bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang yechimlar.
5. Agar kerak bo'lsa, ta'mirlashni faqat ixtisoslashgan tashkilotlarda amalga oshiring. Amalga oshiruvchi tashkilotlarning manzillari Kafolat xizmati kafolat kartasida ko'rsatilgan.
6. Xizmat muddati stetoskop iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 7 yil. Ishlab chiqarilgan yili va oyi qadoqda ko'rsatilgan.
7. Belgilangan xizmat muddati tugagandan so'ng, vaqti-vaqti bilan mutaxassislariga murojaat qilish kerak (ixtisoslashtirilgan ta'mirlash tashkilot) stetoskopning texnik holatini tekshirish.
8. Utilizatsiya qilishda o'sha paytda amaldagi qoidalarga amal qiling. hududingizdagi qoidalar. Yo'q qilish uchun maxsus shartlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanmagan.
9. Ishlash shartlari: harorat +10 ° C dan + 40 ° C gacha; qarindosh namlik 85% yoki undan kam. Saqlash va tashish shartlari: harorat -34 ° C dan + 50 ° C gacha; nisbiy namlik 85% yoki undan kam.

KAFOLAT

1. Ushbu stetoskopga sotilgan kundan boshlab 24 oy kafolat beriladi.
2. Kafolat majburiyatlari kafolat kartasi bilan beriladi qurilmani xaridorga sotishda. Kafolat kartasi ushbu qo'llanmaning oxirgi sahifasida joylashgan.
3. Kafolat quyidagi sabablarga ko'ra ishdan chiqqan va/yoki nuqsonlari bo'lgan mahsulotlarga taalluqli emas: noto'g'ri foydalanish; zararga olib keladigan ehtiyotsiz foydalanish; o'zgartirishlar; ruxsatsiz tashkilot tomonidan ta'mirlash (shaxsiy shaxs); foydalanish, va/yoki saqlash va/yoki tashish qoidalarini buzish; uchinchi shaxslarning harakatlari yoki fors-major holatlari. Stetoskopni sotib olayotganda dilerdan kafolat kartasini to'ldirishni talab qiling.

XIZMATLAR

ROSSIYA: 24 soatlik bepul liniya: 8-800-200-00-37.

Moskva: (+7-495) 718-00-44. Internet: www.LittleDoctor.ru.

BELARUS: Tel. bepul ishonch telefoni: +375 (17) 392-00-11.

QOZOQISTON: Tel. bepul ishonch telefoni: +7 (7232) 700-790.

O'ZBEKISTON: Toshkent: (+998-95) 194-87-12.

Iste'molchi sifatga da'vo qiladi va jo'natishni xohlaydi rasmiy import qiluvchining manzili:

Rossiya: 117218 Moskva, PO Box 36, Firma K and K MChJ (yuridik manzili: 117218, Moskva, Novocheremushkinskaya ko'chasi, 34, 1-bino, VII xona) Tel. bepul ishonch telefoni: 8-800-200-00-37

Ukraina: pochta bo'limi 123 m. Kiev 03049, «Ergokom» TPK PP. Tel. hech qanday to'lovsiz ishonch telefoni: 0-800-30-12-08

Belarusiya: 220033 Minsk, st. 26-zavod, izolyatsiyaning bir qismi. pom. 4H, «Fiatos» UP. Tel. bepul ishonch telefoni: +375 (17) 392-00-11









Qozog'iston: 070010, Ust-Kamenogorsk, st. Karbysheva, 24, TOO «Kazmedimport» Telefon/faks: 8 (7232) 76-97-97, e-mail: info@kazmedimport.kz, www.kazmedimport.kz.

O'zbekiston: 100157 Toshkent sh., Uchtepa tumani, 24-kvartal, ko'cha Shirin, 42A uy "AKBARS PHARM" MChJ. Tel. ma'lumotnoma xizmatlar: (+99895) 194-87-12

Ishlab chiqaruvchi: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapur Pochta manzili: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapur 917699 (Little Doctor International (C) Pt. Ltd., Yishun Central P.O. Box 9293, Singapur 917699).

Ishlab chiqarish joyi / ishlab chiqaruvchisi: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., №8, Tongxing Road iqtisodiy va texnik rivojlanish hududi, 226010 Nantong, Jiangsu, XItoy XALQ RESPUBLIKASI (Little Doctor Electronics (Nantong) Co., Ltd., № 8, Tongxing yo'lining iqtisodiy va texnik rivojlanish hududi, 226010 Nantong, Jiangsu, KXR XALQ).

Belgilarni dekodlash:

	93/42/EEC direktivasiga muvofi qligi		Yevropa Ittifoqidagi vakili
	Yevropa Ittifoqidagi vakili		Ishlab chiqarilgan sana: YYYY-yil, MM-oy (paketda ko'rsatilgan)
	Ishlab chiqaruvchi		Namlikdan uzoqroq tuting
	Muhim: Foydalanuvchi yo'riqnomasini o'qing		LOT raqami

Ushbu Yo'riqnomaning qayta ko'rib chiqilgan sanasi oxirgi sahifada IXXX/YYMM/NN sifatida ko'rsatilgan, bu erda YY - yil, MM - oy va NN - tahrir raqami. Texnik xususiyatlar mahsulotning ishlashi va sifatini yaxshilash uchun oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin.

LD Prof-Plus үлгісіндегі фонендоскоп

Қан тамырының соғуын Коротков әдісі бойынша тыңдауға арналған.

LD Prof-I үлгісіндегі стетофонендоскоп

Арнаулы: Дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлер үшін ересек адамдардың жүрегін, өкпесін, тамырларын, асқазан-ішек жолдарын тыңдауға арналған.

LD Prof-II үлгісіндегі стетофонендоскоп

Арнаулы: Дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлер үшін балалардың жүрегін, өкпесін, тамырларын, асқазан-ішек жолдарын тыңдауға арналған педиатриялық стетофонендоскоп.

LD Prof-III үлгісіндегі неонатальды стетофонендоскоп

Арнаулы: LD Prot-III үлгісіндегі неонатальды стетофонендоскоп дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлер үшін жаңа туған нәрестелердің жүрегін, өкпесін, тамырларын, асқазан-ішек жолдарын тыңдауға арналған.

LD Prof-IV үлгісіндегі стетоскоп

Арнаулы: LD Prot-IV үлгісіндегі акушерлік стетоскоп дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлер үшін жатырдағы нәресте жүрегінің соғуын тыңдауға арналған.

Күту, сақтау, жөндеу және өтелге шығару:

1. Стетоскопты жоғары ылғалдылықтан, тура түсетін күн сәулесінен, соққылардан сақтау қажет.
 2. Аспапты жылыту құралдары мен ашық отқа тым жақын жерде сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.
 3. Аспапты ластанудан сақтаңыз.
 4. Стетоскоптың уытты ерітінділерге жанасуына жол бермеңіз.
 5. Қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстарын тек мамандандырылған ұйымдарда ғана жүргізіңіз. Кепілдемелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін ұйымдардың мекен-жайлары кепілдемелік талонда көрсетілген.
 6. Қызмет мерзімі 6 жыл. Өндірілген жылы аспаптың қорабында көрсетілген.
 7. Белгіленген қызмет ету мерзімі бітерде стетоскоптың техникалық жағдайын тексертіп алу үшін ауық-ауық мамандарға (мамандандырылған жөндеу ұйымдары) көрсетіп тұрған дұрыс.
 8. Ал егер оны өтелге шығару қажет болса, сол уақытта Сіздің аймақта қолданыста болған өтелге шығару ережелерді басшылыққа алыңыз. Өндіруші өтелге шығарудың арнайы шарттарын белгілемеген.
 9. Пайдалану шарттары: температура +10°C-дан +40°C-ға дейін; салыстырмалы ылғалдылық 85% немесе одан төмен.
- Сақтау және тасымалдау шарттары: температура -34°C-дан +50°C-ға дейін; салыстырмалы ылғалдылық 85% немесе одан төмен.

Кепілдемелік міндеттемелер:

а) Бұл стетоскопқа сатылған күнінен бастап 24 айға кепілдемелік мерзім белгіленген.

б) Кепілдемелік міндеттемелер аспап тұтынушыға сатыларда кепілдемелік талонмен ресімделеді.

Кепілдемелік қызмет көрсетуші ұйымдар: Усть-Каменогорск, тел. (+7-7232) 76-93-93.

Сертификаттау, мемлекеттік тіркеу:

Стетоскопты өндіру ISO 13485 халықаралық стандарты бойынша сертификатталған.

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі – тіркеу нөмірі ТК ҚР-МТ-7N№011563 от 10.07.2013.

Аталған өнім ҚР емдік дәрі-дәрмектер, медициналық техника және медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесіне енгізілген.

✉ Сапасы жөніндегі талаптар мен шағымдар ҚР аумағында қабылданады: «Казмедимпорт» ЖШС, Өскемен қ, Карбышев к-сі, 24. т.8 (7232) 76-97-97, e-mail: info@kazmedimport.kz, www.kazmedimport.kz

Өндіруші: Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Компаниясының өнімі Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore.

Мына заводта жасалған: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / KAFOLAT KARTASI / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /
SAVDO TASHKILOTINING NOMI VA MANZILI /
САУДА ҰЙЫМЫНЫҢ АТАУЫ МЕН МЕКЕН-ЖАЙЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / SOTISH
SANASI / САТЫЛҒАН КҮНІ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА /
SOTUVCHINING IMZOSI /
САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ

ПЕЧАТЬ (ШТАМП) ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /
SAVDO TASHKILOTINING MUHRI (MUHRI) /
САУДА ҰЙЫМЫНЫҢ МӨРІ (МӨРТАБАНЫ)

Внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил:

Men tashqi ko'rinishini tekshirdim, mahsulotni to'liq konfiguratsiyada oldim:

Кепілдемелік қызмет көрсету Шарттарымен таныстым, сыртқы түрін тексердім, толық жиынтығындағы товарды қабылдап алдым:

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ /
XARIDORNING IMZOSI /
САТЫП АЛУШЫНЫҢ ҚОЛЫ

www.LittleDoctor.sg

